


产品名称	货号
MGISP-Smart 8	900-000504-00
自动定量移液系统应用拓展套装	510-003583-00

# MGISP-Smart 8

## 自动化定量移液系统

MET CB CE EAC

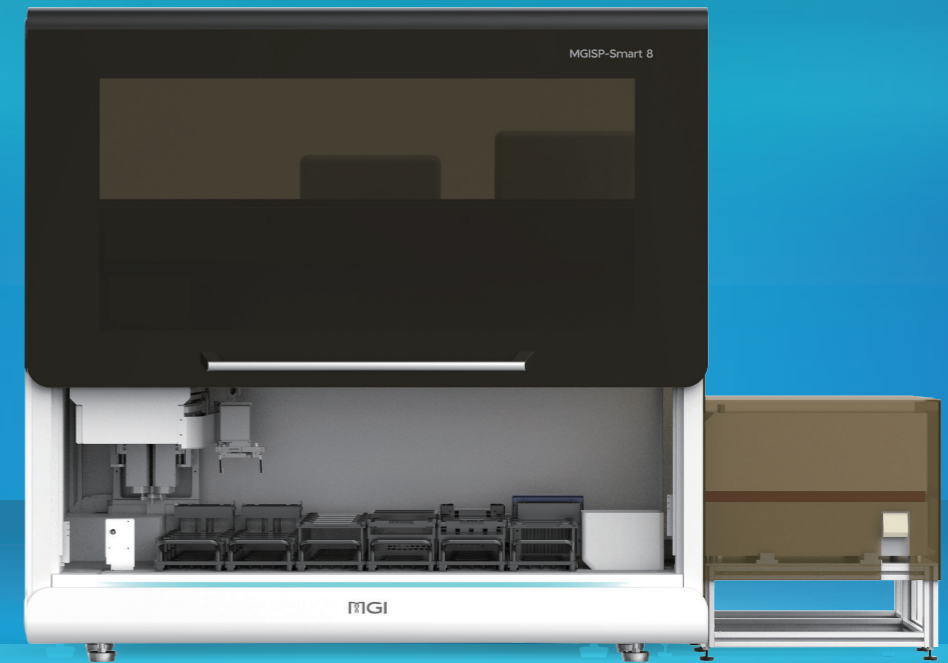

深圳华大智造科技股份有限公司  
深圳市盐田区北山工业区综合楼11栋  
股票代码：688114

官网：mgi-tech.com  
邮箱：MGI-service@mgi-tech.com  
电话：4000-688-114

版本号：2024年7月版 | MGPA0702201



官方微信




官方网站

#### 版权声明


本手册版权属于深圳华大智造科技股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。本手册中所有商标或标识均属于深圳华大智造科技股份有限公司及其提供者所有。

# 定量移液全自动

MGISP-Smart 8 自动化定量移液系统由MGISP-Smart 8 自动化样本制备系统、酶标仪及 ZLES 自动化定量移液系统（软件）组成，可实现定量和均一化或定量和Pooling的自动化操作。

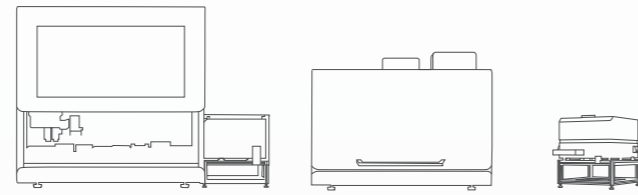


- ① **MGISP-Smart 8**  
进行试剂体系配制工作
- ② **酶标仪**  
进行定量工作
- ③ **ZLES 自动化定量移液系统**  
控制软件

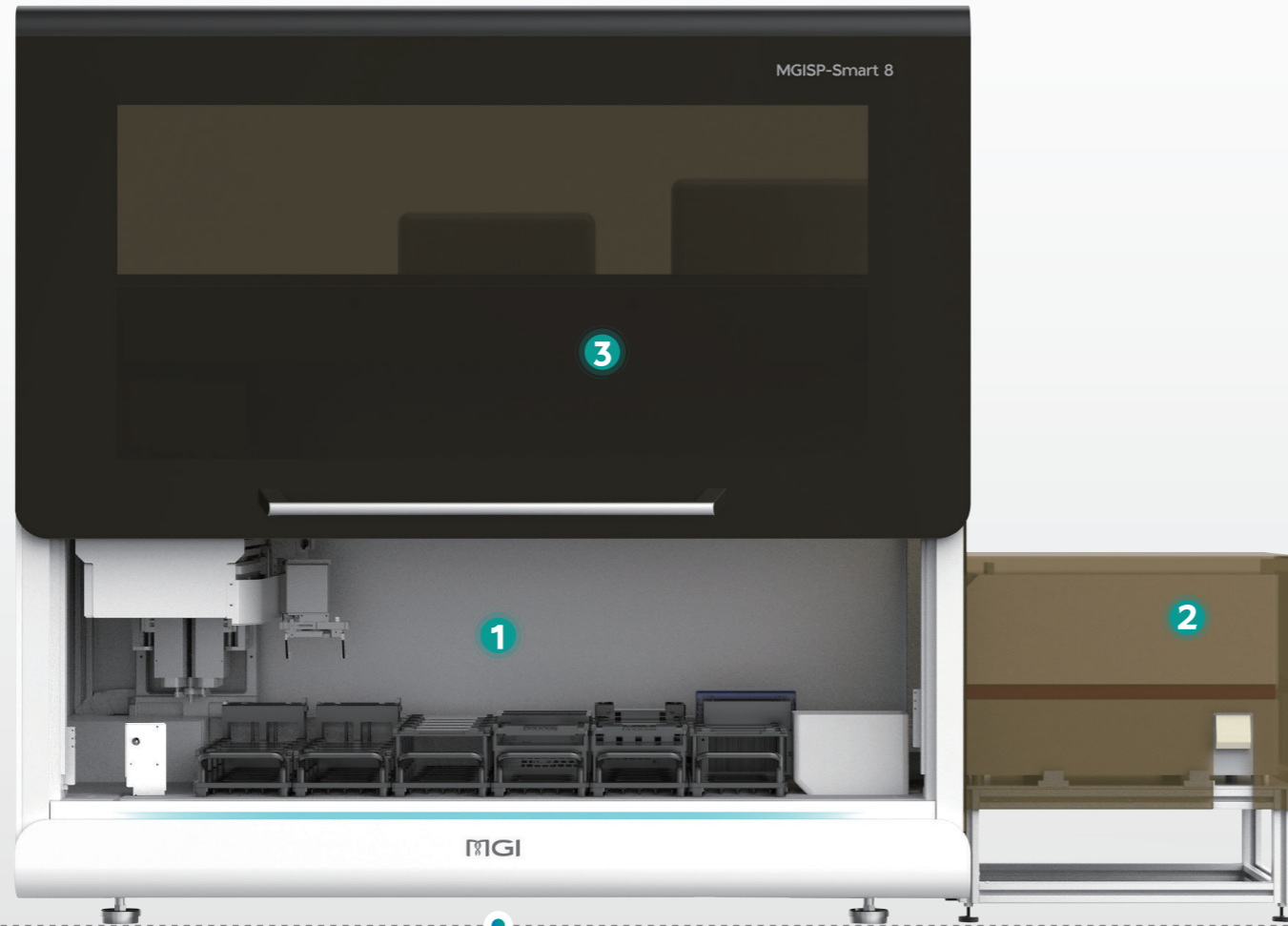

## 全流程自动化

- 试剂体系配制
- 自动化定量
- 自动核对
- 自动计算CSV表格
- 自动均一化
- 自动Pooling

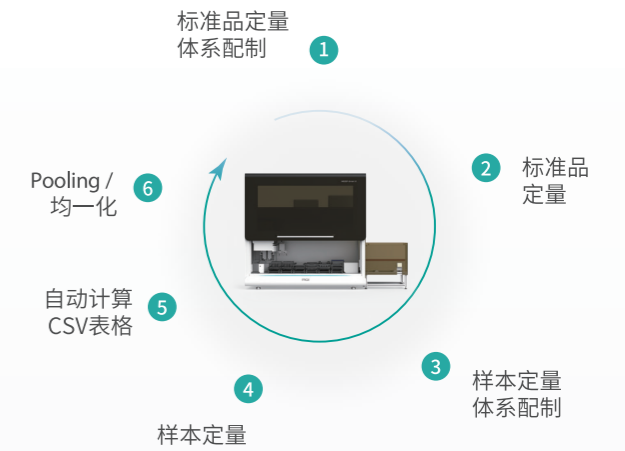

## 用户友好型软件

- **指引清晰**: 简单三步, 即可完成实验设置。
- **用户管理**: 支持不同角色权限的分配。
- **自动信息处理**: 支持定量浓度的核对, 同时, 可根据浓度信息自动生成CSV表格。



**<1**  
小时全流程  
运行时间

**1~88**  
例实验样本  
灵活上机

本系统可针对PCR文库、DNB样本及提取产物, 实现定量+均一化/定量+Pooling的全自动化操作流程。

此外, 本系统也可以应用于建库应用中, 实现建库全流程自动化。

